





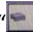






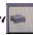


Epoc 样本测试和结果查询

- 1. 开/关机:** Host: 短按“”; Reader: 短/长按“”
- 2. 登陆:** User ID: 任意; Password: 不输; 点“Login”
- 3. 自检(15s):** 双击 , 自检 15s, 结束出现“Insert test card to begin test”
- 4. 插卡:** 插卡前拆测试卡; 加样孔朝上, 插至 1/3 处停下, 双手平推, **快速果断一次到底**
- 5. 校准(180s):** **勿加样**; 结束出现“Inject Sample”
- 6. 加样(<450s):** **450s 内必须加样**; 摘除针头排净注射器前端空气; 橡胶塞密封; 混匀样本; 摘除橡胶塞; 将注射器插入加样口, 左右旋转使注射器压紧; 均匀平稳推注(勿停顿), 听到滴声停止, 注射器可依旧垂直立于测试卡直至结果显示
- 7. 测试(35s):** 35s 完成测试, 显示结果; 按“”退出; 如已连接牙打印机, 按打印机键“”打印, 如已连接信息系统, 按“”将数据传输到电脑
- 8. 查询:** Host 用户界面, 屏幕下方箭头“”, “View test”, 选中后长按

Epoc 样本测试和结果查询

- 1. 开/关机:** Host: 短按“”; Reader: 短/长按“”
- 2. 登陆:** User ID: 任意; Password: 不输; 点“Login”
- 3. 自检(15s):** 双击 , 自检 15s, 结束出现“Insert test card to begin test”
- 4. 插卡:** 插卡前拆测试卡; 加样孔朝上, 插至 1/3 处停下, 双手平推, **快速果断一次到底**
- 5. 校准(180s):** **勿加样**; 结束出现“Inject Sample”
- 6. 加样(<450s):** **450s 内必须加样**; 摘除针头, 排净注射器前端空气; 橡胶塞密封; 混匀样本; 摘除橡胶塞; 将注射器插入加样口, 左右旋转使注射器压紧; 均匀平稳推注(勿停顿), 听到滴声停止, 注射器可依旧垂直立于测试卡直至结果显示
- 7. 测试(35s):** 35s 完成测试, 显示结果; 按“”退出; 如已连接牙打印机, 按打印机键“”打印, 如已连接信息系统, 按“”将数据传输到电脑
- 8. 查询:** Host 用户界面, 屏幕下方箭头“”, “View test”, 选中后长按